

Un **compagnon** de poche



Index

1. Contenu du paquet	3
2. Présentation du produit	3
3. Station de recharge	3
4. Instructions de sécurité	4
5. Premier usage	5
6. Déclencher une alarme	5
7. Explication des voyants LED	6
8. Spécifications techniques	6
9. Informations sur le recyclage	7

Introduction

Nous vous remercions d'utiliser le système SafetyTracer. Nous avons développé cette application avec le plus grand soin pour vous permettre de tirer la sonnette d'alarme en cas de besoin. Malheureusement, malgré toutes les précautions, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin d'aide. SafetyTracer vous aide dans de telles situations. Il vous suffit d'informer les autres et d'appeler ainsi à l'aide. Ce manuel a été préparé avec le plus grand soin. Si, malgré cela, il y a des imperfections ou si vous avez d'autres améliorations ou remarques, n'hésitez pas à nous en faire part.

1. Contenu du paquet

1. Komy Pico
2. Câble de chargement magnétique
3. Adaptateur électrique

1



2



3



2. Présentation du produit

1. Bouton On/Off
2. Bouton SOS
3. Microphone
4. Lumière LED GPS
5. Lumière LED GSM
6. Haut-parleur
7. Pins de contact de charge

5

1

4



2

3

6

7



3. Station de recharge

En option, une station de charge peut être fournie avec le Komy Pico. Cette station de charge permet de recharger encore plus facilement le Komy Pico.

(Remarque : les boutons de la station de charge ne peuvent pas être utilisés pour régler une alarme).

- Pour utiliser la station de charge, connectez le cordon de connexion situé en bas de la station de charge à l'adaptateur fourni avec le Komy Pico.
- Branchez l'adaptateur sur une prise murale. Un anneau bleu s'allume sur la station de charge.
- La station de charge est maintenant prête à l'emploi.
- Pour charger le Komy Pico, il suffit de le placer dans la station de charge.



4. Instructions de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser le Kompy Nano. Conservez ce manuel d'utilisation pour vous y référer en cas de besoin.

Information

Veillez suivre les instructions de sécurité données dans ce manuel, Si vous avez des questions ou des ambiguïtés, veuillez contacter votre fournisseur, contacter Safetytracer.

Vous trouverez des informations générales sur le site www.safetytracer.eu

Précautions de sécurité

Pour une installation et une utilisation correctes et sûres du Kompy Nano, il est essentiel que vous suiviez les mesures de sécurité généralement acceptées, en plus des informations de sécurité supplémentaires contenues dans ce manuel.

Des avertissements et des consignes de sécurité supplémentaires, le cas échéant, sont inclus dans ce manuel.

Des textes d'avertissement et de sécurité et / ou des symboles ont été placés sur l'équipement si nécessaire.

Déclaration de sécurité

Cet équipement a été testé pour être conforme au certificat de sécurité selon les spécifications de la norme : EN 60950 : 2006 + A12 : 2011.

Responsabilité

SafetyTracer BV se réserve le droit de modifier les données et/ou les spécifications de tout appareil ou logiciel mentionné dans cette publication sans notification préalable. Mentionnés dans cette publication sans notification préalable. Malgré tout le soin apporté à l'exactitude de cette publication, SafetyTracer BV n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou un mépris de cette publication.

Instructions de sécurité importantes:

- Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et les manuels avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Conservez toutes les instructions de sécurité et les manuels pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- Tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans les manuels doivent être respectés pour des raisons de sécurité personnelle.
- Ne nettoyez jamais le Kompy Nano avec des détergents liquides ou des produits de nettoyage provenant d'un aérosol, mais utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.
- Ne connectez pas d'autres équipements que ceux recommandés par SafetyTracer.
- Tout écart par rapport aux recommandations peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement et des systèmes.
- Ne placez pas l'équipement sans protection supplémentaire dans des environnements humides ou à l'extérieur s'il n'est pas explicitement indiqué que l'appareil a été conçu à cet effet.
- N'exposez pas l'équipement à des températures ou à une humidité extrêmes.
- N'exposez pas l'équipement à des champs magnétiques et électromagnétiques puissants.

- Ne placez pas l'équipement sur une surface instable ou vibrante.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'équipement.
- Évitez les chocs violents pendant le transport.
- L'équipement ne doit être alimenté qu'avec une alimentation conforme aux spécifications de l'équipement.

5. Premier usage

Avant de pouvoir utiliser le Kompy Pico, vous devez effectuer les étapes suivantes.

Chargement

Pour charger le Kompy Pico, connectez le cordon de charge fourni à l'adaptateur. Le cordon de charge est doté d'une fixation magnétique. Connectez-le au point de charge situé à l'arrière du Kompy Pico. Le voyant rouge clignote lentement pendant la charge.

Activer

Allumez le Kompy Pico en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde.

Éteignez le Kompy Pico en appuyant simultanément sur le bouton marche/arrêt et sur le bouton d'alarme pendant 2 secondes.

6. Déclencher une alarme

Une alarme est déclenchée en appuyant sur le bouton d'alarme pendant 3 secondes. Lorsque l'alarme est déclenchée, vous entendez un bip et la LED verte du Kompy Pico commence à clignoter.

Lorsque l'alarme est activée, elle est automatiquement transmise dans notre plateforme aux soignants ou au centre de soins appropriés.


Tant qu'une alarme n'a pas été acceptée et traitée par le soignant, le Kompy Pico reste l'alarme. Dans cette phase d'alarme, un nouvel appel d'alarme n'est pas possible.

Si l'alarme est acceptée par le prestataire de soins, une connexion vocale/audible peut être établie afin de permettre une conversation. Si le personnel soignant appelle le Kompy Pico, une conversation est immédiatement engagée.

Une conversation entre le personnel soignant et vous n'est possible que si vous avez appuyé sur le bouton d'alarme. Dans tous les autres cas, il n'est pas possible d'effectuer un appel téléphonique vers le Kompy Pico.

7. Explication des voyants LED


LED verte

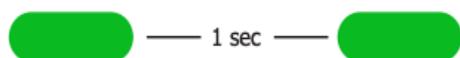

Clignotement lent = Recherche d'un réseau GSM



Un seul clignotement = Connecté au réseau GSM

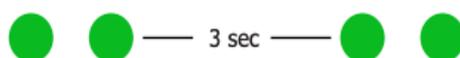


Double clignotement = Connecté au réseau GPRS




Lumière fixe = carte SIM absente ou défectueuse

LED bleue

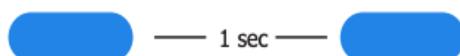

Clignotement lent = Recherche d'un signal GPS

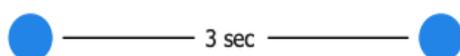

Un seul clignotement = Connexion du satellite

8. Spécifications techniques

Taille	60mm x 41mm x 16mm
Poids	44g
Batterie	900 mAh Li-ion, rechargeable
Standby	120 heures
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
IP Class	IP65
Agrément	conformément à la norme R&TTE 99/CE/05

9. Informations sur le recyclage



Le symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de déposer l'équipement électronique dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur votre point de dépôt de recyclage, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ou le détaillant où vous avez acheté le produit.

- Ne pas jeter le Kompy Nano avec les déchets ménagers.
- Les piles ne doivent pas être jetées dans les eaux municipales et doivent être collectées séparément.
- La mise au rebut de l'emballage et de votre Kompy Nano doit être effectuée conformément aux réglementations locales.