

Een **kompaan** op zakformaat

Mijn Kompy - handleiding
Kompy Watch 4G



Inhoud

1. Inhoud doos	3
2. Product overzicht/functies	3
3. Veiligheidsinstructies	3
4. Eerste gebruik	5
5. Alarm maken	6
6. Uitleg stappenteller	6
7. Uitleg spraak notificaties	6
8. Technische informatie	7
9. Recycle informatie	7

Voorwoord

Hartelijk dank voor het gebruik van een van onze Kompy Watch 4G. Wij hebben met de grootste zorg dit apparaat ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen in een situatie terecht komen waarin u hulp nodig heeft. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

1. Inhoud doos

1. Kompy Watch 4G
2. Oplaadstation
3. USB-C Oplaadkabel
4. Power adapter



2. Product overzicht/functies



3. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de Kompy Watch 4G gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier.

Algemene informatie vindt u op www.safetytracer.eu

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de Kompy Watch 4G is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding.

Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding.

Waarschuwings- en veiligheidsteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

Veiligheidsverklaring

Deze apparatuur is getest om te voldoen aan het veiligheidscertificaat in overeenstemming met de specificaties van de norm: EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

Aansprakelijkheid

SafetyTracer houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is SafetyTracer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:



- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak de Kompy Watch 4G nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door Safetytracer aanbevolen apparatuur.
- Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur specificatie.
- Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanning voerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

4. Eerste gebruik

Voordat de Kompy Watch 4G gebruikt kan worden, voert u de onderstaande stappen uit.

Opladen

- Sluit de USB-kabel van het oplaadstation aan tussen het oplaadstation en de adapter.
- Plaats het horloge in het oplaadstation.
- U krijgt nu een gesproken bevestiging “Uw horloge wordt opgeladen”. In het scherm van de Kompy Watch 4G zal een oplaadindicator verschijnen.
- Het duurt ongeveer twee uur om de Kompy Watch 4G volledig op te laden.
- U kunt het scherm van de Kompy Watch 4G aanzetten door de knop aan de zijkant kort in te drukken, of door het scherm aan te raken.

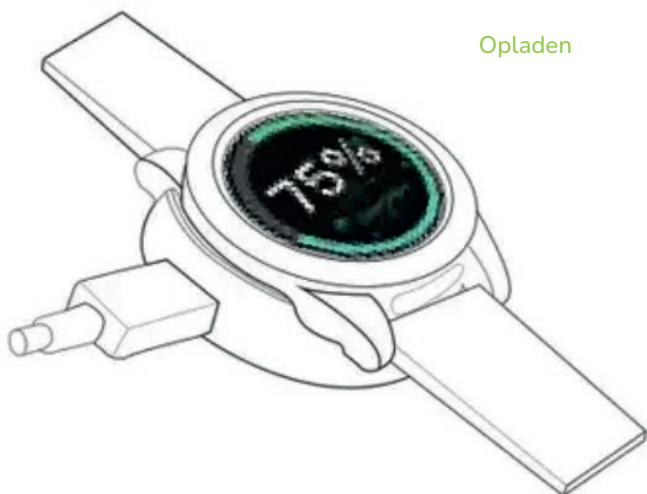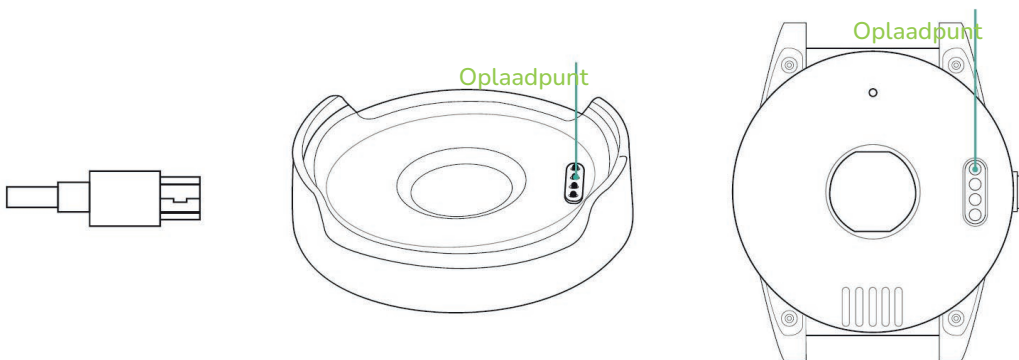

5. Alarm maken



Een alarm maakt u door de alarmknop aan de zijkant van het horloge 3 seconden ingedrukt te houden. De Kompy Watch 4G zal gaan trillen en hoort u een gesproken melding “Het alarm is geactiveerd.” U heeft nu ongeveer tien seconden de tijd om het alarm te annuleren. U doet dit door op het kruisje op het scherm te drukken.

Als het alarm is geactiveerd dan zal het alarm automatisch in ons platform aangeboden worden aan de juiste hulpverlener.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de Kompy Watch 4G in alarmstand staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.

Als het alarm is geaccepteerd door de hulpverlener kan een spreek-/luisterverbinding worden gemaakt, zodat een gesprek gevoerd kan worden. Als de hulpverlener belt naar de Kompy Watch 4G dan komt er meteen een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de Kompy Watch 4G.

6. Uitleg stappenteller

De Kompy Watch 4G is voorzien van een stappenteller. Als het scherm aanstaat, swipet u naar rechts en druk op “Stappenteller”, Uw afgelegde afstand en verbruikte calorieën voor de dag worden nu getoond.

Het aantal afgelegde stappen wordt ook op de wijzerplaat weergegeven.

7. Uitleg spraak notificaties

1. De Kompy staat aan = De Kompy Watch 4G is actief en alarmeren is mogelijk.
2. De Kompy gaat uit = De Kompy Watch 4G is uitgeschakeld en alarmeren is niet meer mogelijk.
3. De Kompy is bijna leeg = De batterij van de Kompy Watch 4G is bijna leeg. Notificatie herhaalt zich 3 maal.
4. De Kompy wordt opgeladen = De Kompy Watch 4G start met opladen.

8. Technische informatie

Afmeting	47,5mm x 35,4mm x 17mm
Gewicht	65 gram
Batterij	3,7V 580mAh, oplaadbaar
Standby-tijd	120 uur
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +70°C
IP klasse	IP67
Goedkeuring	in overeenstemming met de norm R&TTE 99/CE/05

9. Recycle informatie



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product apart moet worden afgevoerd van gewoon huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur in te leveren bij de daarvoor bestemde recyclingcentra.

Voor meer informatie over inzamelpunten voor elektronische apparatuur neem contact op met of raadpleeg de website van de plaatselijke gemeente.

- Gooi de Kompy Watch 4G niet weg met het huisvuil.
- Batterijen horen niet bij het huisvuil en moeten apart worden ingezameld.
- Het weggooien van de verpakking en uw Kompy Watch 4G dient te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.